




Acro 2019-nCoV IgG/IgM rýchly test

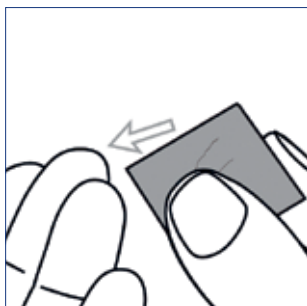


1 Vzorku odoberte z bočnej strany prostredníka alebo prstenníka. Na očistenie konca prsta použite štvorčeky s alkoholom.

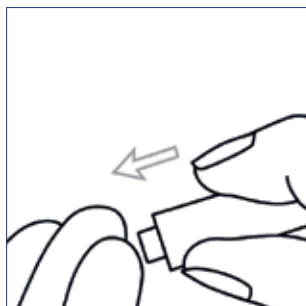


2 Lancetu priložte jemne k prstu a prepichnete kožu. Prvú kvapku krvi vytlačte a zotrite.

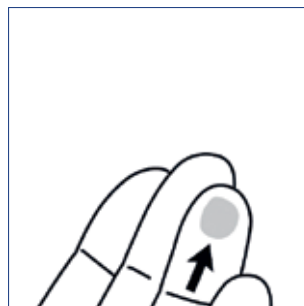


3 Pre zvýšenie toku krvi prst jemne masírujte, ale nie neustále.

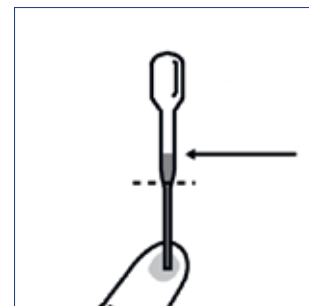


4 Kvapátko držte kolmo a nasajte krv asi 1 cm nad zúženú časť.

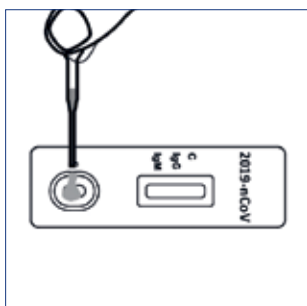

5 Kazetu vyberte z plastového vrečka a umiestnite ju na čistý a rovný povrch. Pridajte 1 plnú kvapku krvi (približne 20 μ l) do otvoru pre vzorku (S).

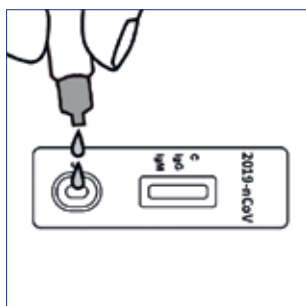


6 Pridajte 2 kapky pufu (približne 80 μ l) a zapnite časovač.

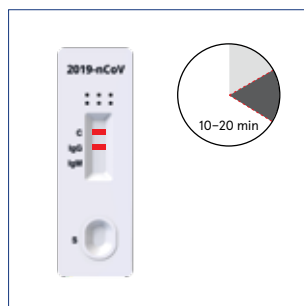

7 Po 10 minútach vyhodnoťte výsledok. Po 20. minúte už výsledok neinterpretujte.


Pred vykonaním testu si prosím prečítajte návod na použitie.

Acro 2019-nCoV IgG/IgM rýchly test

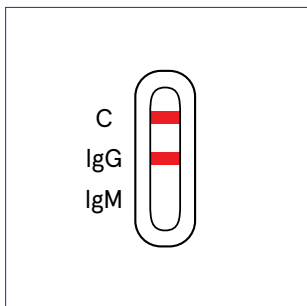


IgG pozitívny výsledok

Zobrazia sa dva farebné prúžky. Jeden farebný prúžok sa zobrazí v kontrolnej zóne (C) a ďalší prúžok v zóne IgG.

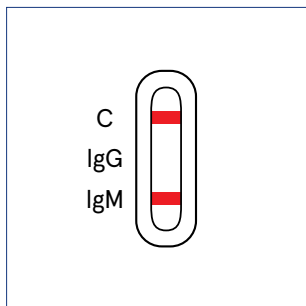


IgM pozitívny výsledok

Zobrazia sa dva farebné prúžky. Jeden farebný prúžok sa zobrazí v kontrolnej zóne (C) a ďalší prúžok v zóne IgM.

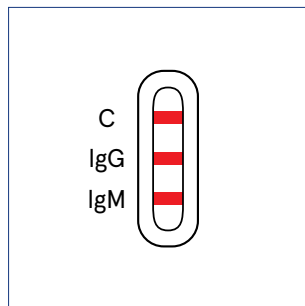


IgG a IgM pozitívny výsledok

Zobrazia sa tri farebné prúžky, jeden prúžok v zóne (C), jeden prúžok v zóne IgG a jeden prúžok v zóne IgM.

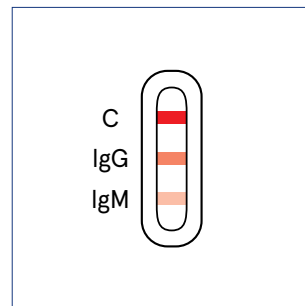


POZNÁMKA: V závislosti na koncentrácii protilátok proti 2019-nCoV, ktoré sú vo vzorke prítomné, je intenzita farby výsledkového prúžku rôzna. Akýkoľvek odtieň farby testu je nutné hodnotiť ako pozitívny výsledok.

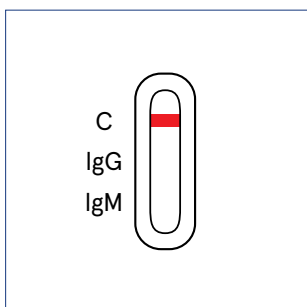

Negatívny výsledok

Jeden farebný prúžok sa zobrazí v kontrolnej zóne (C) a žiadny sa nezobrazí v zóne IgG alebo IgM.

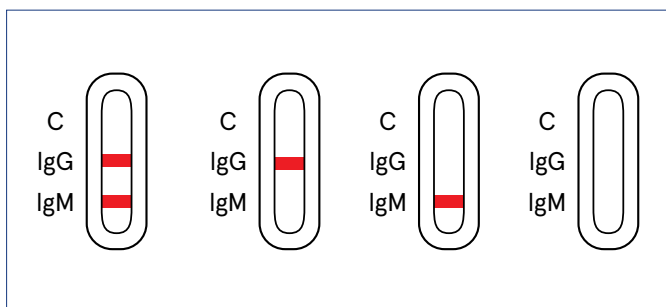

Neplatný výsledok

V kontrolnej zóne (C) sa nezobrazí žiadny prúžok. Skontrolujte pracovný postup a vyšetrenie zopakujte s novým testom. Pokiaľ by sa problém opakoval, prestaňte kit používať a kontaktujte zástupcu firmy Aidian.

Pre profesionálne použitie *in vitro*.

Kontaktné informácie

Aidian Oy, Fínsko
Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

E-mail: info@aidian.sk

www.aidian.sk

Produkt	Číslo produktu	Obj. číslo
Acro 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette, 25 tests	INCP-402	154601