




QuikRead go[®] CRP a CRP+Hb

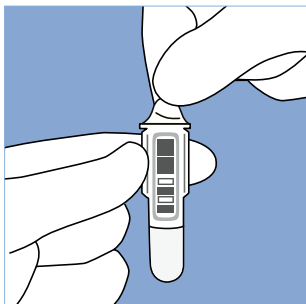


1 Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.

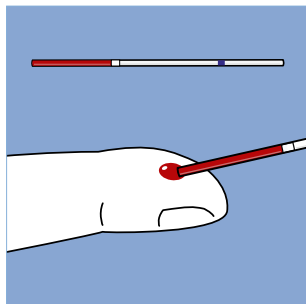

2 Odoberte pacientovi vzorku krvi až po bielu zarážku (20 µl). Uistite sa, že sa v kapiláre nenachádzajú žiadne vzduchové bubliny. Prebytok vzorky krvi na vonkajšej strane kapiláry utrite.

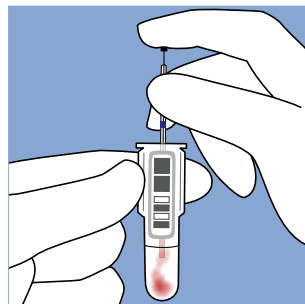


3 Vložte kapiláru so vzorkou krvi (20 µl) do kyvety s puфом a vzorku vytlačte piestom. Uistite sa, že je kapilára úplne prázdna.

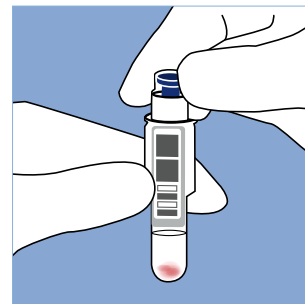


4 Kyvetu dôkladne uzatvorte viečkom s reagensiou CRP. Netlačte na vnútornú modrú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.



5 Na displeji prístroja QuikRead go zvolte možnosť **Meranie**.

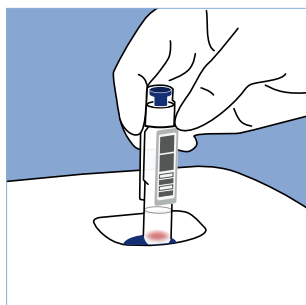

6 Vložte kyvetu do meracej komôrky prístroja čiarovým kódom k sebe.

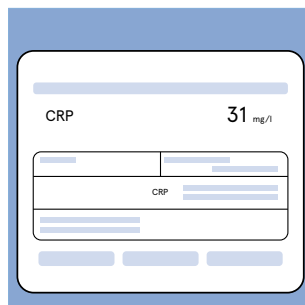

7 Po skončení merania sa na displeji zobrazia výsledky a kyveta sa automaticky vysunie z meracej komôrky. Pri teste QuikRead go CRP+Hb sa výsledok Hb zobrazuje pod výsledkom CRP.

Pred vykonaním testu si, prosím, prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

QuikRead go[®] CRP a CRP+Hb



Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie** súpravy.



Tuba obsahujúca
viečka
s reagensiou

Skladovanie pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie** súpravy.
Skladovanie pri teplote 18–25°C: **1 mesiac**
(7,5 hodiny denne – **3 mesiace**).



Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–25°C: do **dátumu expirácie** súpravy. Neotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote 2–8°C: **6 mesiacov** / pri teplote 18–25°C: **3 mesiace**.



Otvorená
kyveta

Pred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete zahriať na teplotu 18–25°C. Test je nutné vykonať do **2 hodín** od otvorenia kyvety. Vzorka v puferi je stabilná po dobu **2 hodín**.



Kontrolné
materiály CRP

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie**.
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: **2 mesiace**.



Kontrolný
materiál Hb

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie**.
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: **1 mesiac**.

Kontaktné informácie

Aidian Oy, Fínsko

Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

Tel. +421 944 313 888

www.aidian.sk / www.quikread.sk

www.tackleamr.com / www.testcrp.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go CRP súprava s kapilármi a piestikmi	135171
QuikRead go CRP+Hb súprava s kapilármi a piestikmi	140068
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb Control	141154
QuikRead Capillaries 20 µl	67962
QuikRead Plungers	67966
Prístroj QuikRead go	135867