




QuikRead go[®] HbA1c

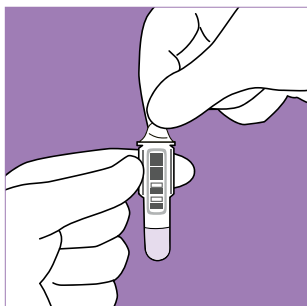


1 Odstráňte z kyvety kryciu fóliu. Nedotýkajte sa rovných čistých plôch v spodnej časti kyvety.

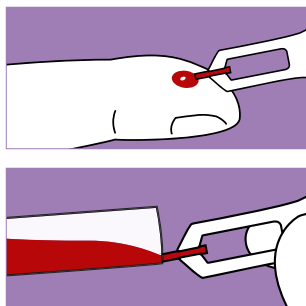


2 Držte QuikRead go Sample Collector 1µl takmer vodorovne pod povrchom vzorky. Úplne naplňte celú kapilárnu časť odberovej pomôcky.

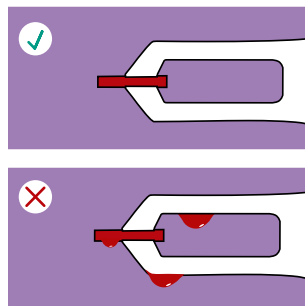

Poznámka! Skontrolujte, či je celá kapilára naplnená. **Odberovú pomôcku neotierajte!** Pokiaľ je na odberovej pomôcke prebytočná vzorka, odberovú pomôcku vyhodíte.

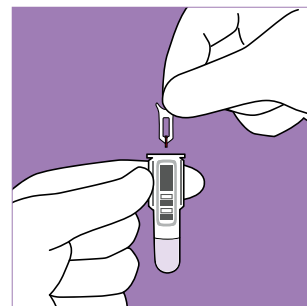


3 Do 1 minúty vložte odberovú pomôcku do kyvety. Odberová pomôcka sa nedotýka roztoku v kyvete.

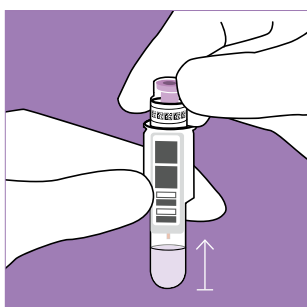

4 Kyvetu pevne uzatvorte viečkom s reagensiou pre HbA1c. Netlačte na vnútornú fialovú časť viečka. Test vykonajte do 5 minút.

[Kyvetu držte v zvislej polohe a nepretrepávajte ju.](#)

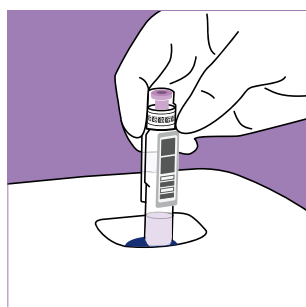

5 Na displeji prístroja QuikRead go zvolte možnosť **Meranie**. Vložte kyvetu do meracieho otvoru prístroja čiarovým kódom smerom k sebe.



6 Po skončení merania sa na obrazovke objavia výsledky a kyveta sa automaticky vysunie z meracieho otvoru.

Pred vykonaním testu si prosím prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.

QuikRead go[®] HbA1c



Súprava

Neotvorená súprava pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie** súpravy
Neotvorená súprava pri teplote 18–25°C: **2 mesiace**



Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie** súpravy. Neotvorené kyvety po otvorení vonkajšej ochrannej fólie: pri teplote 2–8°C: **6 mesiacov** / pri teplote 18–25°C: **2 mesiace**



Otvorená kyveta

Pred testovaním kyvetu vytemperujte na teplotu 18–25°C
Test je nutné vykonať do **1 hodiny** od otvorenia kyvety
Vzorka v kyvete uzatvorenej viečkom je stabilná po dobu **5 minút**



Tuba obsahujúca viečka s reagensiou

Neotvorená tuba pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie** súpravy
Po prvom otvorení pri teplote 2–8°C: **6 mesiacov** / pri teplote 18–25°C: **2 mesiace**



Odberové pomôcky

Skladovanie pri teplote 2–25°C: do **dátumu expirácie** uvedenej na krabičke s odberovými pomôckami Sample Collector 1µl



HbA1c Control Set (kontrolný materiál)

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do **dátumu expirácie**
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: **50 dní**

Kontaktné informácie

Aidian Oy, Fínsko
Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6

Tel.: +421 944 313 888

www.aidian.sk / www.quikread.sk

Produkt	Kat. č.
QuikRead go HbA1c s QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 testov	151058
QuikRead go HbA1c Control Set (kontrolný materiál)	154520
Prístroj QuikRead go	135867
QuikRead go Sample Collector 1µl, 25 ks	154457