


Stručný návod



1 Odstráňte z kyvety fóliový obal. Nedotýkajte sa kyvety v jej spodnej časti.



2 Držte Sample Collector takmer vodorovne pod povrchom vzorky. Úplne naplňte celú kapilárnu časť Sample Collectora.

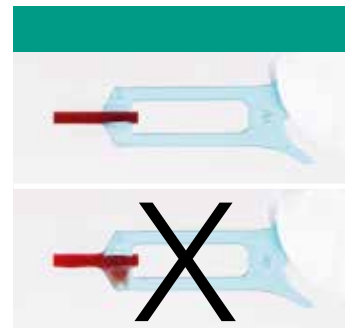

Poznámka! Skontrolujte, či je celá kapilára naplnená.
Sample Collector neutierajte! Pokiaľ je na Sample Collectore prebytočná vzorka, vyhod'te Sample Collector.



3 Do 2 minút vložte Sample Collector do kyvety a zatvorte kyvetu viečkom s reagensiou. Nestlačte tyrkysovú vnútornú časť viečka. Test vykonajte do 2 hodín.



4 Na displeji prístroja QuikRead go zvolte možnosť "Meranie". Vložte kyvetu do meracieho otvoru prístroja čiarovým kódom k sebe.



5 Po skončení merania sa na displeji zobrazia výsledky a kyveta sa automaticky vysunie z meracieho otvoru.

Pred vykonaním testu si prosím prečítajte podrobnejšie informácie v návode na použitie.



Skladovanie reagensíí



Súprava s reagensiami

Skladovanie neotvorenej súpravy pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie uvedeného na súprave



Krabička s odberovou pomôckou Sample Collector

Skladovanie zatvorenej krabičky pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravy



Neotvorené kvety po otvorení vonkajšej ochrannnej fólie

Skladovanie pri teplote 2–8°C: 6 mesiacov

Skladovanie pri teplote 18–25°C: 3 mesiace



Tuba obsahujúca viečka s čínidlom

Neotvorená tuba pri teplote 2–25°C: do dátumu expirácie súpravy

Po prvom otvorení pri teplote 2–25°C: 6 mesiacov



Otvorená kveta

Vzorka v pufri je stabilná po dobu dvoch hodín. Test je nutné vykonať do dvoch hodín od otvorenia kvety. Pred vykonaním testu nechajte pufer v kvete zahriať na izbovú teplotu.



Kontrolné materiály easy CRP

(viď tabuľka nižšie)

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8°C: do dátumu expirácie

Fľaštička po prvom otvorení pri teplote 2–8°C: 2 mesiace



Orion Diagnostica Oy, Fínsko
Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR, Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, Česká republika
Tel.: +421 944 313 888
www.oriondiagnostica.sk, www.quikread.sk, www.tacklearnr.com

8100-01SK, 09/2019

Produkt	Kat. č.
QuikRead go easy CRP, 50 testov » s odberovou pomôckou Sample Collector 10 µl	153287
QuikRead go CRP Control Low (kontrolný materiál)	153765
QuikRead go CRP Control (kontrolný materiál)	153764
QuikRead go CRP Control High (kontrolný materiál)	153763
Prístroj QuikRead go	135867

Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.quikread.sk